

Vue Avant

Bouton « Cœur »

Appuyez lorsque le bouton clignote ou appuyez pour envoyer des données.

Voyants de Réception


- vert** Recueil de données réussi
- jaune** Erreur lors du recueil de données

Icône patient

Restez près du Communicateur lorsque la lumière est allumée

Voyant de réception du poids et de la tension artérielle

Allumé lorsque les données du capteur ont été reçues

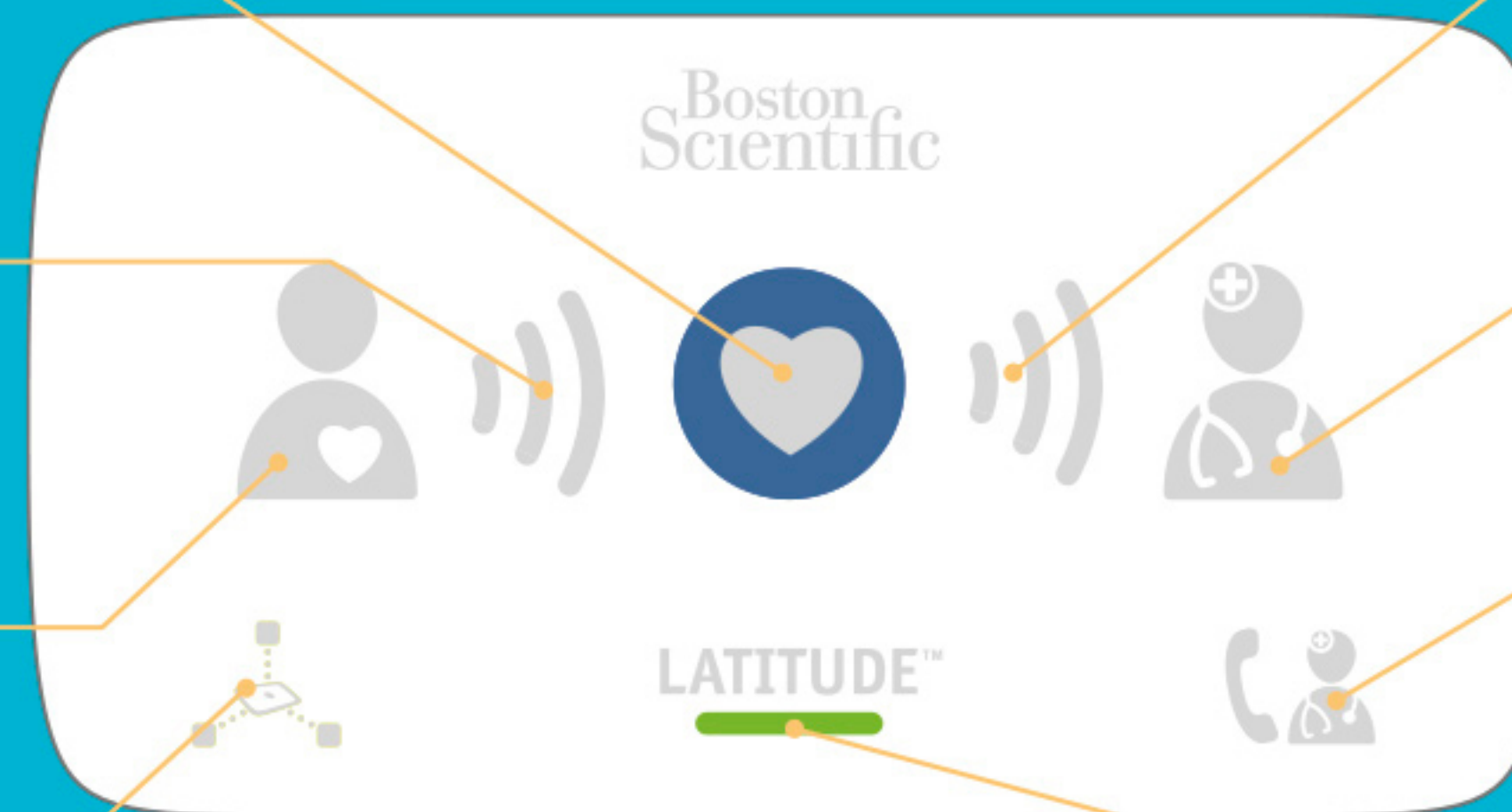

Voyants de transmission

- vert** Envoi de données réussi
- jaune** Erreur lors de l'envoi de données

Icône médecin

S'allume uniquement lorsque l'envoi des données a réussi

Icône appeler le médecin

Appelez votre médecin lorsque la lumière est allumée

Voyant d'alimentation

Allumé orsque l'appareil est branché au courant électrique.

Vue Arrière

